

クイックガイド

マッスル振動ガン

1. 付属品



①本体



②ボールヘッド



③フラットヘッド



④ツボ押しヘッド



⑤フォークヘッド



⑥USBケーブル


2. 使い方



電源・レベル切替ボタン

電源オン・オフ	電源ボタンを長押しして、電源を切り替え。
振動レベル切替	電源オン状態で、レベル切替ボタンを押して、四段階に切替。

3. 各部説明

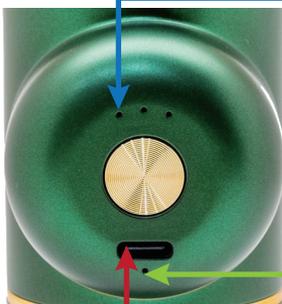

振動レベルランプ

振動レベル	振動数(回/分)	レベルランプ表示
1	約1000	●○○
2	約1600	●●○
3	約2200	●●●
4	約3000	左から順に点滅

バッテリーランプ

電源オン状態で、5秒に1回点滅表示

点滅3回	約100~70%
点滅2回	約70~30%
点滅1回	約30~0%
充電中	赤点灯
充電終了	緑点灯

USB 充電ポート
5V/2A 充電器を使用してください。

4. アタッチメント取り付け



①電源をオフして下さい。



②アタッチメントを引っ張って抜いてください。



③交換するアタッチメントを本体に差し込んでください。

5. 商品仕様



寸法：約 17×14×4.7 cm	入力電圧電流：5V/2A
パワー：15W	重量：約 460g
バッテリー容量：2500mAh	振幅：約 6mm
充電時間：約 2.5 時間	使用時間：約 3 時間（最大出力）
振動レベル：4 段階	アタッチメント：4 種類
色：ブラック、グリーン、レッド	

6. サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。 お問い合わせ：wklife@wklife.jp

7. ご注意

ご使用前に必ずクイックガイド「**安全上のご注意**」、「**取り扱い上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

【安全上のご注意】

関節に使用しないでください。体の軟部組織にのみ使用してください。

頸部、腋窩、胸部、脊柱など筋肉が薄く主要な動脈や臓器の近くにある部位は、本製品の使用をお勧めしておりません。痛みは適切な程度で、同じ位置での使用時間は約 3 分以内を目安としてください。

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないで下さい。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器

次のような方は使用しないで下さい。

- ・子供、未成年者、妊娠中の女性
- ・悪性腫瘍、心臓疾患、糖尿病（合併症含む）、高度な末梢循環障害による知覚障害
- ・血行障害、毛細血管拡張、血圧異常、血栓のある方
- ・傷、湿疹、はれもの、神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌
- ・安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- ・発熱、体調不良、身体異常、骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、骨の変形、急性疾患
- ・薬を服用中の方、医療機関で治療中の方（医師にご相談の上ご使用下さい）
- ・治療や手術箇所、疾患部へ使用する方
- ・体力が極端に衰えた高齢者
- ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- ・医師からマッサージ マッサージガンの使用を禁じられている方
- ・以前に、各種 マッサージ器 マッサージャー マッサージガン を使用した際に体調を崩されたことがある方

上記以外で、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

※本クイックガイドに従った使い方をせず生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品は、医療機器ではありません。

※本製品は、治療を目的とした マッサージ 機 / マッサージ 器 / マッサージャー / マッサージガン ではありません。一般家庭用の運動補助器です。

【取り扱い上のご注意】

- ・本クイックガイドの内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- ・防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手での使用は避けてください。
- ・一度の使用を約 10 分を目安に使用してください。
- ・本製品の連続使用時間は約 1 時間を目安に使用してください。連続して使用する場合は本製品を約 30 分間完全に停止させた後再開してください。
- ・本製品を分解、改造することはできません。
- ・充電中は使用しないでください。
- ・本製品の充電には、5V/2A 充電器を使用してください。
- ・本製品の仕様及び外観、表示、内容、付属品は実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。

8. 保証規定

■保証について

- 保証期間は新品購入日から3ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売品は理由を問わず保証対象外となります。
 - 保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要なため大切に保管してください。
 - 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
 - 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
 - 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
 - 保証対象品は製品本体のみ。メモリーカードやケーブルなどの付属品は消耗品扱いとなり、保証対象外となります。
- 以下の場合には保証対象外となります。
1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など
 5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが止められた場合
 8. 付属品や消耗品類の交換
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合

■初期不良について

- 製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■返送時の送料について

- 1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）
「日本郵便ゆうパック」着払いにてお送りください。
別の運送業者の場合は、元払いで発送ください。

- 2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）
元払いにてお送りください。

※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前連絡ない場合
- ・指定業者以外での着払い
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い